



Komfortní zdroj tepla pro vaše svaly

InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Infračervené žárovky Philips pro péči o zdraví a tělo jsou vytvořeny tak, aby léčily hluboko uložené svalové neduhy a zranění způsobená při sportu. Tyto reflektorové žárovky jsou excelentním řešením pro lokalizované tepelné ošetřování a uvolnění svalových bolestí. Lze je použít rovněž k léčbě revmatických obtíží. Tato forma tepelné terapie navíc urychluje vyléčení různých zranění, jako jsou zranění způsobená při sportu a neinfekční povrchová zranění, a v mnoha případech poskytuje rychlou a účinnou úlevu od bolesti. Výhodou této formy tepelné terapie je lokální povzbuzení krevního oběhu v pokožce vlivem rozšíření cév. Výsledkem je zvýšení transportu metabolitů a dalších základních biochemických látek. Výhodou je rovněž hlubší pronikání tepla, které vede k jemnému a příjemnému hřejivému pocitu.

Výhody

- Optimální pronikání do pokožky a svalů pro maximální úlevu od svalových bolestí
- 90 % energie vyzařeno ve formě infračervených tepelných paprsků
- Okamžitý, přesně ovladatelný zdroj tepelného vyzařování

Vlastnosti

- Tvar reflektoru umožňující koncentraci tepla na požadované místo.
- PAR38 má vnitřní reflektor opatřený 100% hliníkovou vrstvou, což znamená, že 100 % tepelných vln je vyzařeno předním otvorem reflektoru.
- PAR38 má menší, kruhové vlákno přispívající k vyšší koncentraci teploty v paprscích.
- Dobré vyvážení mezi životností a tepelným výstupem
- Červeně zbarvené baňky potlačují vyzařování viditelného světla a snižují oslnění

InfraRed Healthcare Heat Incandescent


Aplikace

- Poskytuje úlevu od svalových bolestí a nemocí, jako je revmatismus, bolest v kříži, neuralgie, nachlazení, apod.
- Podporuje zotavení ze zranění
- Poskytuje vysoký komfort a kosmetickou péči

Versions



Rozměrové výkresy

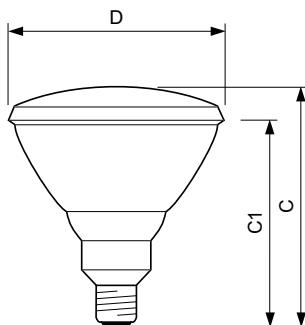

Product	D	C (max)	C1 (max)
PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	121 mm	136 mm	124 mm

